


Marker Set 作成手順①

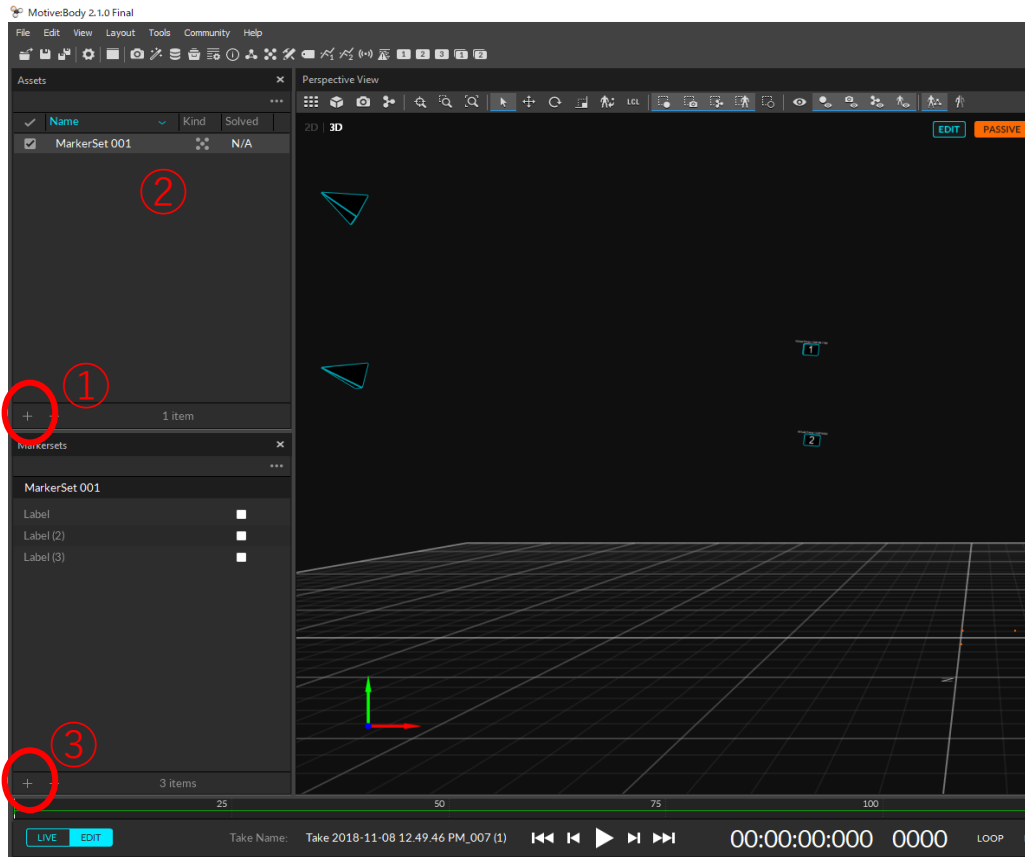

1, Motive最上段の view→Assets Paneを選択

2, Assets内下部の+をクリックし
New Marker Setをクリック
(MarkerSet001は任意で名前を変更できます)
※左図①参照


3, Motive最上段の view→Markersets Paneを選択

4, 2で設定したMarkersetを選択
※左図②参照

5, MarkerSets内下部の+をクリックし
必要マーカー数分のLabelを作成
※左図③参照

6, Label名上で右クリックすると
名前の変更が可能です

Marker Set 作成手順②

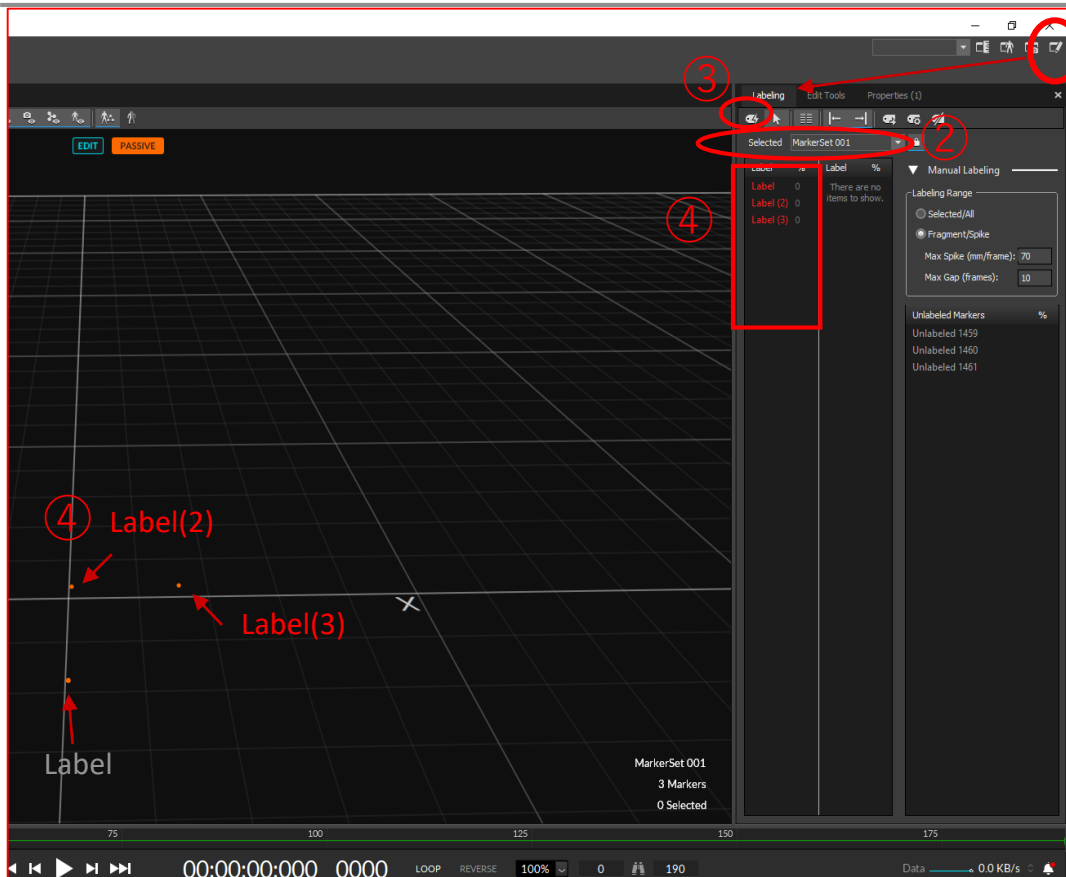

7, Motive最上段右側のEdit Layout
→Labelingを選択
※左図①

8, Selected上でMarkerSet001を選択
(任意で名前を決めた場合はそのMarkerset名)
※左図②

9, Quick Label Modeをクリックし、
カーソルを👉マークに切り替え
※左図③

10, Label上でマーカー名をクリックし、
Perspective View上で該当マーカーを選択
※左図④

注：MarkerSetへのラベリングはデータ修正後(特にマージ)
に行う事をお勧めします